



Guide de démarrage rapide montre téléphone mobile

Si vous avez souscrit la montre téléphone mobile avec le service de téléassistance, allez directement à l'étape 2.

Sinon, si vous avez souscrit sans le service de téléassistance, il vous faut utiliser votre propre abonnement mobile, et commencer à l'étape 1.

1 Insérer votre carte SIM


Il faut au préalable désactiver le code pin de votre carte sim via un téléphone portable. Pour insérer votre carte SIM, glissez la carte SIM sur le côté droit de la montre téléphone mobile comme indiqué sur le schéma ci-contre.

! Attention il faut insérer une micro carte SIM dans le minifone mobile.



2 Charger votre batterie

Brancher la prise USB dans la prise de courant

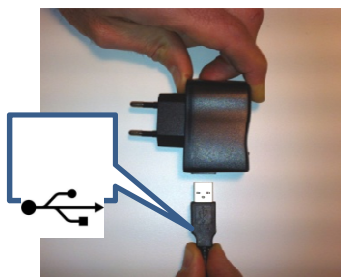

Soulever le cache à gauche et insérer la prise du chargeur dans la montre téléphone dans le sens indiqué ci-dessous



ATTENTION

ne pas se tromper de côté pour ne pas endommager la prise

Brancher la prise du chargeur dans une prise de courant



L'icône de batterie indique son remplissage



Note:
Durée de charge
conseillée 1 heure

A charger tout les
jours

3 **Allumer votre montre téléphone mobile**

Presser pendant plusieurs secondes la touche SOS située sous l'écran comme indiqué ci-contre



4 **Emettre votre 1^{er} appel d'urgence**

Appuyer sur le bouton SOS pendant 2 secondes, jusqu'au lancement de l'appel. Relâcher le bouton. L'appel de secours est lancé.

5 **Répondre à un appel**

Votre entourage peut composer votre numéro de téléphone. Votre montre mobile sonne. Il suffit de presser la touche SOS, le haut parleur se met automatiquement en fonction et vous pouvez dialoguer en mode « mains libres ». En fin d'appel, le raccrochage se fait automatiquement.

