

# SYSTEME D'ALERTE SANS FIL

## Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Le système d'alerte sans fil (référence 25536) a été conçu pour alerter lorsqu'une personne est en difficulté.

Pour une utilisation d'aide à domicile ou dans les établissements multi résidents avec les pendentifs additionnels (référence 25537).

### Liste des éléments inclus dans l'emballage :

- Un socle de recharge.
- Une base portable rechargeable.
- Alimentation de la base: batterie rechargeable (3.7V/ 700 mAh) par câble USB.
- 2 pendentifs.
- Alimentation pendentif: 1 pile CR2032 (fournie) x 2.
- Un adaptateur 230V et un câble USB.

### Installation et réglages

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les éléments sont inclus.



**Étape 1 : Charger complètement la base portable** avant toute utilisation. Le temps de charge dépend du niveau de batterie de la base portable. Le temps de charge nécessaire est d'environ une heure (sans utilisation de l'alarme). L'autonomie de la base portable dépend de l'intensité de son utilisation.

Insérer la mini prise USB dans l'emplacement prévu à l'arrière du socle de recharge et connecter la prise USB dans un port USB alimenté (adaptateur USB de prise secteur, ordinateur...). Placer la base portable sur le socle de recharge. Un indicateur LED rouge apparaît sur l'écran. Cela confirme le bon chargement de la base portable. L'indicateur LED devient bleu dès que la base est complètement chargée.

### Étape 2 : Pairage des pendentifs et de la base portable.

Dès que la base est complètement chargée, placer le bouton situé à l'arrière de la base en position ON (comme indiqué Fig.1). La base émet un bip sonore. Replacer la base sur le socle de recharge puis procéder au pairage des pendentifs.

**Le pairage doit être effectué avec la base posée sur le socle de recharge et ce dernier branché par alimentation. Les pendentifs placés à côté. Ce mode de réglage est une sécurité afin d'éviter de dérégler les pairages en utilisation nomade de la base portable.**

1. Sur le socle, effectuer un appui long sur le bouton « Pairage » (comme indiqué Fig.2) jusqu'au bip sonore. Lors de la première utilisation l'écran affiche par défaut le numéro 01 et l'indicateur LED (rouge et bleu) clignote pendant 30 secondes.
2. Sélectionner le numéro souhaité à attribuer au pendentif avec les touches Haut  et Bas  pour faire défiler les chiffres.

3. Puis effectuer un appui long sur le bouton du pendentif à faire correspondre au numéro sélectionné à l'étape précédente jusqu'au signal sonore. Le signal émet 4 bips sonores rapides pour confirmer que le pairage a bien été effectué. Pendant le pairage la LED du pendentif s'allume puis s'éteint automatiquement.
4. Continuer et répéter les étapes 2 et 3 pour le deuxième pendentif et les pendentifs suivants dans le cas de pendentifs additionnels. La base peut paier jusqu'à 45 pendentifs.
5. Lorsque tous les pairages sont réalisés, effectuer un appui court sur le bouton « Pairage » (comme indiqué Fig.2) pour finaliser et l'écran s'éteint.


**Attention :** Le temps disponible pour le pairage est de 30 secondes. Si pendant ce temps aucun pairage n'est effectué, l'indicateur LED de la base s'éteint et le pairage s'arrête.

Lors de la reprise du nouveau pairage à l'étape 1, l'écran indique le dernier numéro attribué au dernier pendentif paieré.


**Attention :** Lors du pairage à l'étape 3, si le signal émet 2 bips sonores distincts (et non 4 bips sonores rapides) cela signifie que le pendentif sélectionné est déjà paieré avec le numéro sélectionné.

**Attention :** Pour supprimer l'ensemble des réglages et paramétrages enregistrés et réinitialiser le système d'alerte sans fil : placer le bouton (situé à l'arrière de la base) en position ON (comme indiqué Fig.1) et effectuer un appui long sur le bouton « Reset » situé à l'arrière de la base portable avec un objet très fin jusqu'au signal sonore. Le signal émet 3 bips sonores rapides pour confirmer que tous les réglages ont été effacés.

**Fig.1**

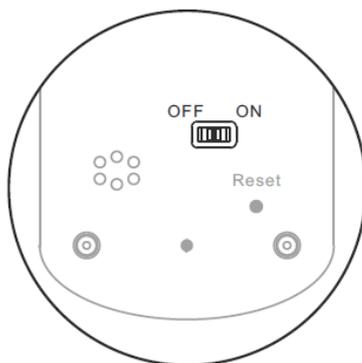

**Fig.2**

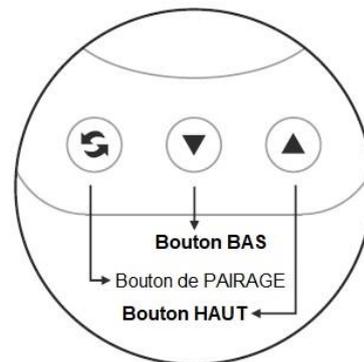

### **Etape 3 : Régler le volume de l'alarme.**

Le volume de l'alarme de la base portable est réglable. Placer le bouton (situé à l'arrière de la base) en position ON (comme indiqué Fig.1) et effectuer un appui long sur le bouton de la base portable jusqu'à ce que l'écran affiche L1. Appuyer successivement sur le bouton afin de sélectionner le volume. La base permet 4 niveaux de réglages. L'écran s'éteint après un délai de deux secondes si aucun appui et enregistre le volume sélectionné.

### **Etape 4 : Utilisation avec alarme 1 pendentif.**

La base portable peut être utilisée sur le socle ou en mode nomade pour recevoir les alertes. Placer le bouton (situé à l'arrière de la base) en position ON pour recevoir les alertes.

Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton du pendentif, cela envoie une alarme sonore et visuelle à la base portable :

- L'écran affiche le numéro correspondant au pendentif.
- Plusieurs bips sonores répétitifs sont émis.
- L'indicateur LED (rouge et bleu) clignote.

**Attention :** Ces informations sont affichées pendant un délai de 20 secondes. Pour arrêter l'alarme, appuyer sur le bouton de la base portable.

Lorsque l'alarme s'arrête automatiquement après le délai de 20 secondes, l'écran s'éteint. L'indicateur LED bleu de la base clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer qu'un pendentif a été activé mais l'information non identifiée. Effectuer un appui court sur le bouton de la base portable pour afficher le numéro du pendentif. La LED bleu s'éteint lorsque le numéro a été visualisé.

**Attention** : La distance de fonctionnement entre les pendentifs et la base portable est de 100 M. Cette distance peut être modifiée selon l'environnement du système d'alerte.

### **Étape 5 : Utilisation avec alarme multi pendentifs.**

Lorsque plusieurs utilisateurs appuient sur les boutons des pendentifs, cela envoie une alarme sonore et visuelle à la base portable :

- Lorsque plusieurs pendentifs sont activés en même temps : l'écran affiche successivement les numéros des pendentifs. Ainsi le numéro du dernier pendentif activé est affiché sur l'écran.
- Plusieurs bips sonores répétitifs sont émis.
- Un rapide bip sonore indique l'activation d'un nouveau pendentif.
- Le délai de 20 secondes est réinitialisé à chaque nouveau pendentif activé.
- L'indicateur LED (rouge et bleu) clignote.

Pour arrêter l'alarme, appuyer sur le bouton de la base portable, ainsi le système considère que le numéro du dernier pendentif est identifié. Puis l'indicateur LED bleu clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer que des pendentifs ont été activés mais non identifiés. Effectuer un appui court successif sur le bouton de la base portable pour faire défiler les précédents numéros des pendentifs qui ont été activés dans l'ordre d'activation de ces derniers. La LED bleu s'éteint lorsque tous les numéros ont été visualisés.

Lorsque l'alarme s'arrête automatiquement après le délai de 20 secondes, l'écran s'éteint. L'indicateur LED bleu clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer que des pendentifs ont été activés mais non identifiés. Effectuer un appui court successif sur le bouton de la base portable pour faire défiler l'ensemble des numéros des pendentifs qui ont été activés dans l'ordre d'activation de ces derniers. La LED bleu s'éteint lorsque tous les numéros ont été visualisés.

**Attention** : le système d'alerte doit permettre d'identifier rapidement les pendentifs. Cependant, l'indicateur bleu clignote pendant un délai de 120 minutes.

La base est portable et peut être placée autour du cou avec la lanière réglable.

### **Étape 6 : Indicateur de batterie faible.**

Lorsque l'indicateur LED jaune du pendentif devient faible ou ne s'allume pas lors de l'appui sur le bouton du pendentif ou que la base portable ne reçoit pas le signal émis par un pendentif, cela signifie que la pile du pendentif est usée : changer la pile.

Utiliser un tournevis cruciforme afin d'ouvrir le compartiment à pile situé sous le pendentif. Placer une pile neuve CR2032 et respecter les polarités (le « + » orienté vers le couvercle). Replacer correctement le couvercle et visser.

**Attention** : lors du changement de pile d'un pendentif, le pairage peut ne pas être maintenu.

Sur la base portable, lorsque l'indicateur LED rouge clignote à intervalle de 3 secondes, cela signifie que la base est déchargée. Charger complètement la base comme indiqué à l'étape 1.

### **Conditions d'utilisation et sécurité**

Utiliser le système d'alarme pour l'usage prévu.

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
La base ne charge pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que le câble USB est correctement relié au socle et à un port USB.</li> <li>- Vérifier que le port USB est alimenté (adaptateur prise secteur, ordinateur...).</li> <li>- Connecter la prise USB dans un autre port USB.</li> <li>- Le bouton peut être en position ON ou OFF pendant le chargement de la base portable.</li> <li>- Vérifier que la base est correctement positionnée sur le socle.</li> </ul>
Le pairing ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Placer le bouton situé à l'arrière de la base portable en position ON.</li> <li>- Le délai de 30 secondes est dépassé.</li> <li>- Vérifier que les piles des pendentifs sont neuves et correctement installées.</li> <li>- Vérifier que la base est placée sur le socle.</li> </ul>
Le pendentif ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que la LED jaune s'allume sur le pendentif lors de l'appui sur le bouton.</li> <li>- Vérifier que le film de protection de la pile est ôté.</li> <li>- Vérifier que les piles sont neuves et correctement installées. Changer les piles.</li> <li>- Vérifier que le pendentif est correctement païré avec la base portable.</li> </ul>
La base portable ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que la base est correctement chargée.</li> <li>- Vérifier que le bouton est en position ON.</li> <li>- Vérifier le volume de l'alarme.</li> <li>- Vérifier la distance de fonctionnement entre le pendentif et la base.</li> </ul>

*NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales*

