



 **TABLE POUR BARRIERES DE LIT**
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL











 **BEDRAIL TABLES**
Instructions manual - MEDICAL DEVICE

 **MESA PARA BARANDILLAS DE CAMA**
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO

REF. 823091



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch Number Número de lote		Conformité CE CE Conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product Reference Referencia del producto		Crain l'humidité Does not tolerate dampness Proteger de la humedad
	Poids maximum de l'utilisateur Max. user Weight Peso máximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

 **NOTICE D'INSTRUCTIONS**
FR

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.


Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide à la marche. Il vous conseillera et informera sur la technique de marche la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Les tables pour barrières de lit sont des dispositifs médicaux. Cette table très pratique et ergonomique est spécialement étudiée pour s'adapter sur les barrières de lit médicalisé. Ses 2 côtés se posent sur les barrières et sont munis de patins antidérapants. Plateau ergonomique. Equipée de 2 crochets dessous pour pouvoir la ranger contre la barrière.

DESCRIPTION DU PRODUIT

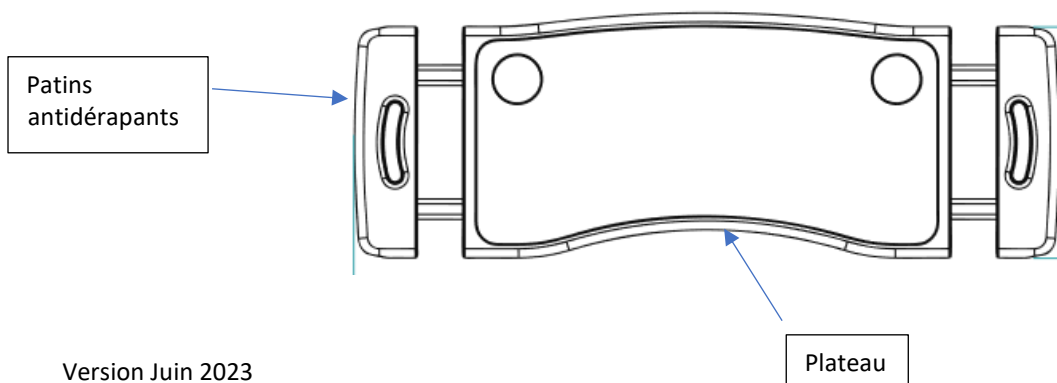

PRECAUTIONS D'EMPLOI




Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Utiliser le produit uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Ne pas dépasser le poids maximum d'utilisation de 10kg.
- Conserver le produit dans un environnement intérieur, à l'abri de la moisissure et de la poussière.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état. En cas de dommage, merci de contacter votre revendeur.
- Suivre attentivement les instructions de montage et s'assurer que tous les composants soient correctement fixés avant toute utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées ou usées, contactez le revendeur.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

INSTALLATION :

Insérez les vis dans les trous des crochets et le panneau. Serrez ensuite les vis (Déjà installé en usine)

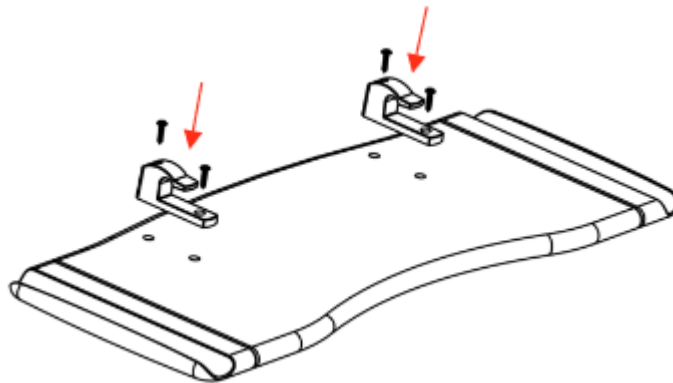

UTILISATION :

Allonger la grille en tirant sur les ailes. Placer la planche sur les rails latéraux. (Attention : les rainures des deux côtés de la planche doivent être placées sur les rails). Poids maxi 10kg.

● Safe load capacity: 15kg



Veillez suspendre la table à la planche tête/pieds après utilisation.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède, un chiffon doux et un détergent neutre.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté sur le produit.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- Vérifier régulièrement le fonctionnement des patins antidérapants
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer la table soi-même. Consulter un revendeur agréé.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.

Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos produits.

- Dans un endroit sec et tempéré

- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)

- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit, ne rien coincer...).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors-tout	Long. 88 à 104 cm (plateau 70,5 cm) x Larg. 33,5 cm x Epaisseur 2,8 cm
Poids	2,3 kg
Poids maximal supporté	10 kg

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



INSTRUCTIONS MANUAL EN

IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.


Consult your doctor or health care professional before using a walking aid. He/she will advise and inform you on the most appropriate walking technique for you.

Distributor: this leaflet must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

Bedrail tables are medical devices. This highly practical and ergonomic tray is specially designed to fit over bed rails. Its 2 sides rest on the rails and are fitted with non-slip glides. Ergonomic tray. Equipped with 2 hooks on the underside for storage against the rail.

PRODUCT DESCRIPTION

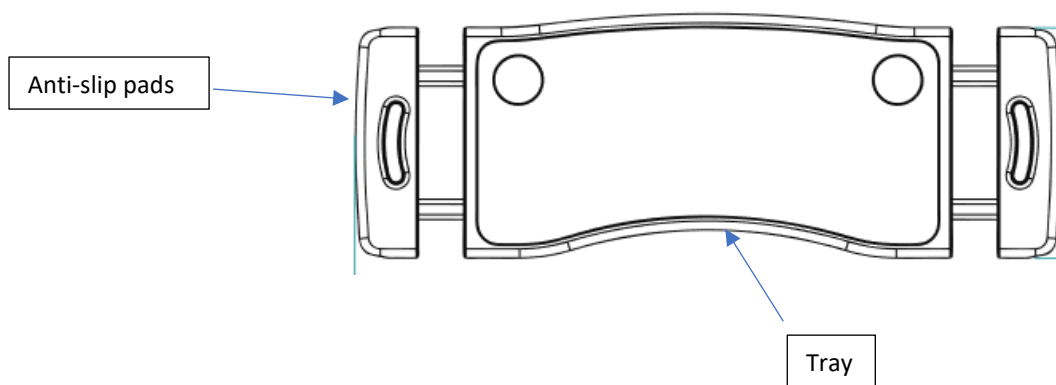

SAFETY PRECAUTIONS




Failure to observe the precautions for use may result in the risk of serious injury.

- Use the product only as described in this manual.
- Do not exceed the maximum operating weight of 10kg.
- Store the product indoors, away from mould and dust.
- Before use, check that all parts are present and in good condition. In the event of damage, please contact your dealer.
- Follow the assembly instructions carefully and make sure that all components are correctly secured before use.
- If any parts are damaged, broken or worn, contact your dealer.

MOUNTING AND USE

- **Installation:** Insert the screws through the holes of the hooks and the board. Then tighten the screws. (Already installed in the factory)

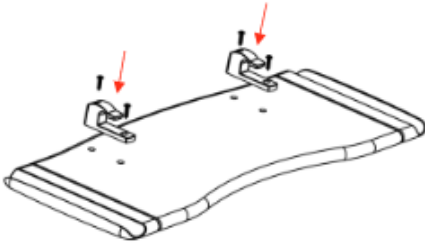

- 1 Extend the rack by pulling out the wings. Place the board on the siderails. (Caution: the grooves on both sides of the board should be placed on the siderails.)

- Safe load capacity: 15kg



- 2 Please hang the table at the head/foot board after use.



CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the product regularly with lukewarm water, a soft cloth and a neutral detergent.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminium and polyamide materials.
- Dry with a soft, clean, dry cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt on the product.
- Periodically check all screws for wear and strength. Replace all broken, damaged or worn parts immediately.
- Regularly check the operation of the anti-slip pads
- In the event of a malfunction, do not repair the table yourself. Consult an authorised dealer.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions may lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.

Keep away from all flames and sources of sparks.

Respect the conditions for storing and stowing your product.

- In a dry and temperate place
- Protect your product by packaging from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place too heavy objects on the product components, do not jam anything...).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overall dimensions	Length 88 to 104 cm (top 70.5 cm) x Width 33.5 cm x Thickness 2.8 cm
Weight	2,3 kg
Maximum weight supported	10 kg

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

WARRANTY

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or material defect. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.


Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

Las mesas para barandillas de cama son dispositivos médicos. Esta práctica y ergonómica mesa ha sido especialmente diseñada para adaptarse a las barandillas de las camas sanitarias. Sus 2 lados se ajustan a las barandillas y están equipados con deslizadores antideslizantes. Bandeja ergonómica. Equipada con 2 ganchos en la parte inferior para guardarla contra la barandilla.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

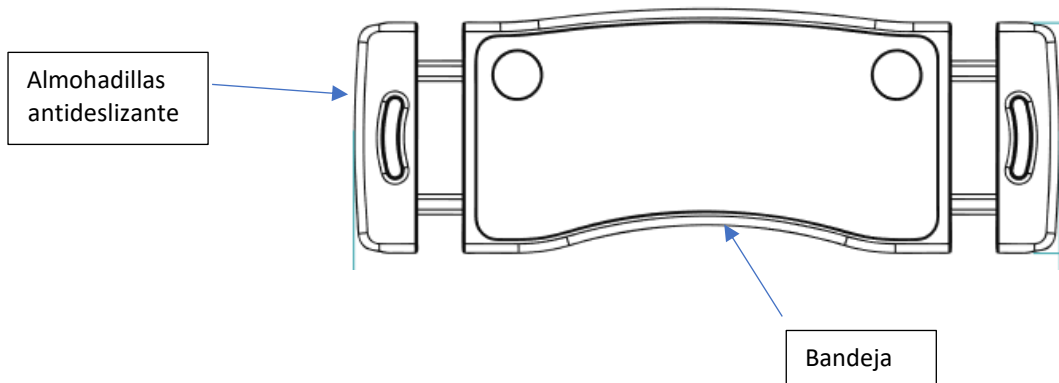

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- Utilice el producto sólo como se describe en este manual.
- No supere el peso máximo de funcionamiento de 10 kg.
- Almacene el producto en interiores, lejos del moho y el polvo.
- Antes de utilizarlo, compruebe que todas las piezas están presentes y en buen estado. En caso de daños, póngase en contacto con su distribuidor.
- Siga atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todos los componentes están correctamente fijados antes de utilizar el aparato.
- Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor.

MONTAJE Y USO

INSTALACIÓN

Introduzca los tornillos a través de los orificios de los ganchos y del panel. A continuación, apriete los tornillos (ya instalados de fábrica).

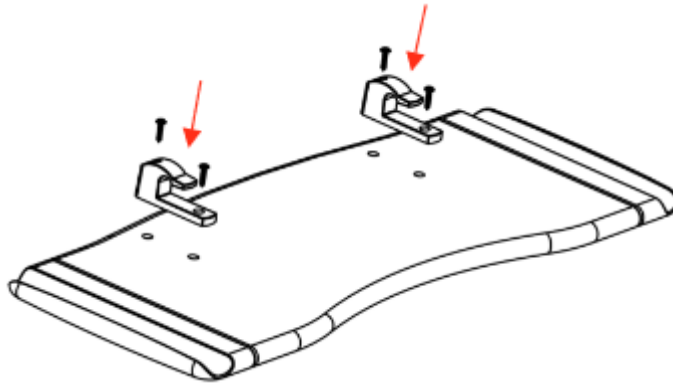

USO

Extienda la rejilla tirando de las alas. Coloque el tablero sobre los raíles laterales. (Atención: las ranuras de ambos lados de la tabla deben colocarse sobre los raíles). Peso máximo 10 kg.

● Safe load capacity: 15kg



Por favor, cuelgue la mesa en el tablero de cabeza/pies después de su uso.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Si no se cuida y mantiene el producto, puede haber riesgo de lesiones graves.

- Limpie el producto regularmente con agua tibia, un paño suave y un detergente neutro.
- No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que podrían dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Seque con un paño suave, limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad en el producto.
- Compruebe periódicamente el desgaste y la resistencia de todos los tornillos. Sustituya inmediatamente todas las piezas rotas, dañadas o desgastadas.
- Compruebe periódicamente el funcionamiento de las almohadillas antideslizantes.
- En caso de avería, no repare la mesa usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir la mesa, recuerde dar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado primero por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que desecharlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

No guarde su producto durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.

Manténgase alejado de toda llama y chispa.

Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de sus productos.

- En un lugar seco y templado
- Proteja su producto embalmándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del producto, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones totales	Largo 88 a 104 cm (superior 70,5 cm) x Ancho 33,5 cm x Grosor 2,8 cm
Peso	2,3 kg
Peso máximo soportado	10 kg

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los problemas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
10 kg