

MANUEL DU DÉAMBULATEUR - AIR



Contenu

- 1.- Important
- 2.- Icônes utilisées sur l'étiquette et dans le manuel
- 3.- Utilisation du produit
- 4.- Description du produit
- 5.- Avertissements et sécurité
- 6.- Montage et utilisation
- 7.- Spécifications techniques
- 8.- Soins et maintenance
- 9.- Recyclage du produit
- 10.- Stockage du produit
- 11.- Durée de vie utile
- 12.- Garantie et service après-vente
- 13.- Essais et essais effectués
- 14.- Détails du fabricant

1.- Important

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le en cas de besoin.

Si vous ne pouvez pas lire ou comprendre un avertissement, une mise en garde ou une instruction, contactez le vendeur avant d'utiliser le produit, sinon vous risquez de subir un préjudice.

Consultez votre médecin ou orthopédiste avant utilisation. Ils vous conseilleront quant à la technique de marche la plus appropriée pour vous.

2.- Icônes utilisées sur l'étiquette et dans le manuel

	Détails du fabricant		Date de fabrication
	Dispositif médical		Respectez les consignes de sécurité
	Poids maximal de l'utilisateur en kg		Déclaration de conformité
	Attention, danger de piégeage		Consultez le manuel d'utilisation
	Informations sur le recyclage des produits		Centre de recyclage
SN	Numéro de série du produit	LOT	Numéro de lot du produit
REF	Référence ou code du produit		

3.- Utilisation du produit

Les marcheurs sont des aides pour aider les personnes ayant des difficultés à marcher et les aider à se soutenir et à garder leur équilibre tout en marchant.

4.- Description du produit



1. Prise ergonomique
2. Tube de préhension réglable
3. Clip de réglage en hauteur
4. Serrure pliante
5. Roues avant
6. Plateau
7. Virole

5.- Avertissements et sécurité




Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner des blessures graves.


- Ne pas dépasser la limite de poids maximale de 100 kg.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées et en bon état de fonctionnement avant d'utiliser le déambulateur.
- Assurez-vous que le déambulateur est complètement ouvert et que le siège est solidement fixé avant utilisation.
- Assurez-vous que les deux poignées sont fixées par le clip de réglage et sont toutes les deux à la même hauteur. Vérifiez que le déambulateur est stable avant de mettre tout votre poids sur les poignées.
- N'utilisez pas le siège lorsque le déambulateur est en pente ou sur un sol inégal. N'utilisez le déambulateur que sur des surfaces planes et solides.
- Remplacez les roues et les viroles si elles sont usées ou endommagées.
- N'utilisez pas le déambulateur pour franchir les trottoirs ou les bordures.
- N'utilisez pas le déambulateur dans les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces d'origine de la marque Forta.
- N'utilisez pas le déambulateur pour marcher à reculons, dans la direction opposée à celle à laquelle vous faites face.

- Ne faites aucun réglage ou changement sur le déambulateur pendant son utilisation.
- Toutes les roues et les viroles doivent être en contact avec le sol en tout temps.
- N'utilisez pas le déambulateur pour monter sur les bordures ou les trottoirs.
- Ne pas utiliser le produit sur des pentes mouillées, glacées ou enneigées.
- Si une pièce est endommagée, cassée ou usée, contactez votre distributeur pour un remplacement.

6.- Montage et utilisation

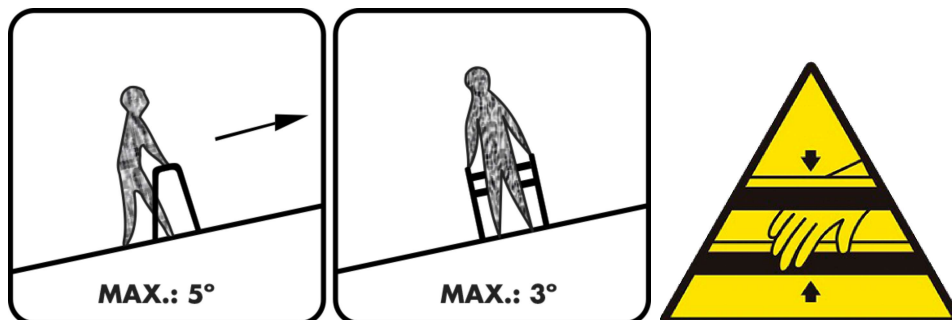

Before using the walker, make sure that both the folding lock and both adjustment clips are fixed and correctly positioned as shown in the adjacent image.

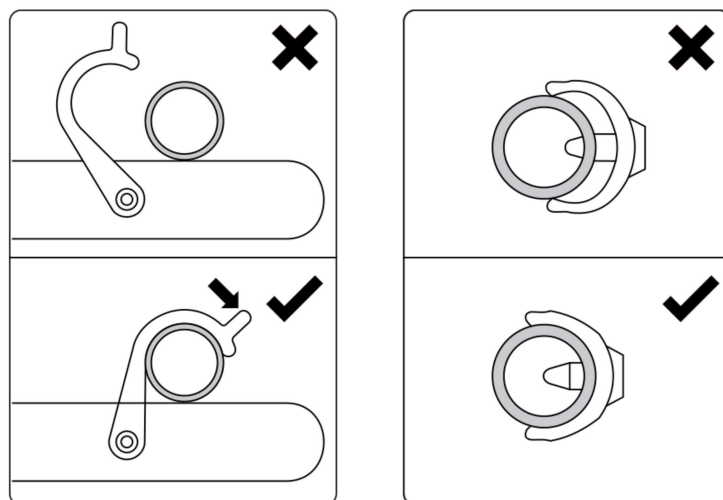

7.- Technical Specifications

Les dimensions, la capacité portante et les poids sont énumérés ci-dessous:

HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR PLIÉE
850 à 910 mm	485 mm	265 mm
LONGUEUR	DIAMÈTRE DES ROUES	
560 mm	150 mm	
POIDS	CHARGE MAXIMALE	
2 560 kg	100kg	

8.- Soins et maintenance



Le fait de ne pas entretenir et maintenir le produit en parfait état peut entraîner un risque d'accident.

- Nettoyez régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux. N'utilisez pas d'abrasifs, de détergents ou de solvants.
- Essuyez avec un chiffon propre, doux et sec.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de saleté ou de poils autour de l'essieu ou des roues.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, qui pourraient endommager les matériaux.
- Si les roues grincent, lubrifiez-les avec un peu d'huile.
- En cas de panne, ne réparez pas vous-même le déambulateur. Consultez un distributeur agréé.

9.- Recyclage du produit



Lorsque le produit est devenu inutilisable et doit être éliminé, contactez votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez le recycler vous-même, demandez à votre service local de gestion des déchets l'entreprise ou le centre de recyclage le plus proche pour obtenir des conseils sur l'élimination.

10.- Stockage du produit



S'il n'est pas correctement stocké, le produit peut être endommagé, entraînant un risque d'accident.

- Ne conservez pas ce produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (p. ex. devant une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source froide.
- Gardez le produit à l'abri des flammes et des étincelles.
- Conservez le produit comme suit :
 - Conservez le produit dans un endroit sec et frais.
 - Protégez le produit de la poussière et de la rouille en l'emballant ou en l'ensachant.
 - Rangez toutes les pièces ou composants retirés au même endroit afin qu'ils ne se mélangent pas avec quoi que ce soit d'autre ou ne se perdent pas.
 - Ne placez aucun poids sur les composants (ne placez pas d'objets lourds sur le produit ou sur aucun composant).

11.- Durée de vie utile

La durée de vie utile prévue du produit est de 1 an dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien. Passé ce délai, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en parfait état d'utilisation et d'entretien. Certaines pièces ou composants peuvent en tout état de cause devoir être remplacés en raison de l'usure normale dans un délai inférieur à ce délai.

12.- Garantie et service après-vente

Conditions générales de garantie:

Seuls les produits Forta d'origine achetés auprès de revendeurs agréés sont couverts par la garantie contre les défauts de pièces et de fabrication.

La garantie court à partir de la date d'achat pendant 3 ans pour la structure et les composants sous réserve des conditions suivantes:

- Seuls les produits FORTA d'origine achetés auprès de revendeurs agréés seront couverts par la garantie contre les défauts de pièces et de fabrication.
- L'établissement acheteur doit immédiatement signaler tout défaut du produit.
- Le fabricant n'aura aucune responsabilité pour les défauts causés par une mauvaise manipulation, la négligence ou le non-respect des instructions énoncées dans ce manuel.
- Pendant la période de garantie, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un assemblage ou de matériaux défectueux sera réparée ou remplacée gratuitement par Forta.
- La garantie sera absolument nulle si des modifications ou des ajustements incorrects sont apportés au produit ou si des pièces ou des options non fournies pour le modèle de produit sont installées.
- Les dommages causés par la rouille causée par une mauvaise utilisation ou une négligence ou l'action ou tout liquide ou gaz pouvant endommager le produit sont exclus de la garantie.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES CONSÉQUENCES D'UN ÉVENTUEL PROBLÈME DE VOYAGE, EN PARTICULIER LES QUESTIONS RELATIVES AU TRANSPORT, AU MANQUE À GAGNER, AUX DÉPENSES, ETC.

Forta n'aura AUCUNE responsabilité dans les circonstances suivantes :

- Usure normale du produit ou utilisation inappropriée ou incorrecte.
- Défauts dans tout montage ou réparation effectué par l'acheteur ou un tiers.
- Manipulation ou entretien négligent ou utilisation de pièces inappropriées.
- Réparations ou modifications effectuées dans des ateliers non officiels.
- Forta n'aura aucune responsabilité pour tout préjudice ou perte subi par l'utilisateur ou un tiers à la suite de toute modification ou altération de tout produit.
- La garantie exclut également les modifications effectuées autrement qu'avec des pièces Forta d'origine.

Le certificat de garantie doit être envoyé à FORTA, S.L. accompagné d'une photocopie de la facture d'achat dans les 15 jours suivant la date d'achat. Pour valider la garantie, l'utilisateur doit soumettre le Certificat de garantie portant le sceau du point de vente qui a vendu le produit. Vous pouvez télécharger le certificat de garantie ici : www.fortasl.es/en/manuales/doc/GARANTIA CONTRACTUEL.pdf.

13.- Essais et essais effectués

Les produits FORTA sont conformes à l'annexe IV du RDM (UE) 2017/745, sont marqués CE et ont été conçus et testés conformément à la norme UNE-EN ISO 11199-2:2021. Forta est tenue de certifier la conformité par son produits présentant un certain nombre d'exigences essentielles. Il existe une norme qui spécifie les méthodes d'inspection et d'essai pour démontrer la conformité des produits à ces exigences. Les normes que l' Les produits conformes sont énumérés ci-dessous:

Brève description de la loi pertinente	Droit actuel
Informations fournies par le fabricant	UNE-EN 1041:2009+A1:2014
Système de gestion de la qualité	UNE-EN ISO 13485:2018
Gestion du risque	UNE-EN ISO 14971:2020
Test des dispositifs médicaux et des déambulateurs	UNE-EN 12182:2012 UNE-EN 11199-2:2021
Évaluation biologique des dispositifs médicaux	UNE-EN ISO 10993-1:2021
Charge maximale	100 kg

14.- Détails du fabricant

FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

España - Espagne

info@fortasl.es

www.fortasl.es



MADE IN EUROPE

